

Invisalign™ Stickables instructions for use. ⚠

ENGLISH

Accessory description:

Invisalign Stickables are accessories that can be used to decorate the outside of Invisalign® clear aligners. This product is available exclusively from Align Technology Inc. Patent is pending.

Indication for use

Invisalign Stickables are intended to be used in accordance with the Instructions For Use as decorative accessories only with Invisalign® clear aligners that are made from Invisalign® SmartTrack material.

Precautions:

- The use of the Invisalign Stickables has not been tested on Vivera retainers, non-SmartTrack grade aligner material, any third party clear aligners and retainers, any other orthodontic supplies such as brackets, retainers, expanders and others, any body parts, e.g. teeth, tongue, nails and skin.
- It is not recommended to apply Invisalign Stickables in areas of crowded or heavily overlapped teeth, short clinical crowns, interior of the aligner, incisal or the lingual part of the aligner, teeth with attachments, precision cuts, or precision wings, the eruption compensation and pontic area of the aligner and compliance indicators. Application of Invisalign Stickables in any of these areas may result in stickers having folds with sharp edges, stickers hiding attachments or wrapping around to the inside of the aligner and blocking the erupting tooth. It is recommended to place one sticker on the outer aligner surface covering one tooth length on the buccal or the outer area of upper anterior teeth – centrals, laterals or canines. Ensure that sticker fits on the crown surface of the aligner and that it does not hang over the incisal or gingival part of the aligner.
- Activities which could alter, damage, loosen, or dislodge the Invisalign Stickables should be avoided. Loosened Invisalign Stickables may be accidentally inhaled or swallowed by patients or could cause other damage to the patient. If stickers are swallowed, it is recommended to allow for these to pass naturally through the digestive system. If the patient is choking and coughing, stay with the person and encourage him/her to cough until the obstruction is cleared. If the patient cannot speak, or is not getting oxygen, seek emergency help immediately. Inform Invisalign Doctor if repeated loosening of the Invisalign Stickables is noticed or for any other questions or concerns. If any unusual symptoms are exhibited, consult health care practitioner (or physician) immediately.
- If a reaction to the stickers is exhibited, discontinue use and contact Invisalign Doctor.

Instructions for use

- Invisalign Stickables should be applied on the outside of aligners that are fresh out of the package. Note: It is recommended to wipe aligners with a tissue prior to applying stickers.
- Sticker adhesiveness may be also reduced in instances when aligners are handled by hands or aligners that are wet due to the presence of oil from

hands, saliva or liquid.

- If aligners are not fresh out of the package, clean and dry aligners thoroughly as per the Invisalign instructions for use before applying stickers.
- Place one sticker on the aligner outer surface covering one tooth length on the buccal area of upper anterior teeth – centrals, laterals or canines. Ensure that sticker fits on the crown surface of the aligner and that it does not hang over the incisal or gingival part of the aligner. Note: stickers can be placed on aligner areas with power ridges.
- It is recommended to replace stickers every 3 days. If stickers are beginning to peel or lift off the aligner, please refer to the sticker removal instructions to replace and reapply a new sticker.
- Invisalign clear aligners that are decorated with stickers should be worn and cleaned as per Invisalign system instructions for use.

Invisalign Stickables placement instructions (Figure 1):

- Slowly lift a sticky rectangular applicator (which has sticker underneath it) with a thumb and an index finger on one hand while holding the sheet of stickers with the other hand. Gently take off the applicator with a sticker underneath it from the sheet.
- Use applicator to line up sticker fully on the buccal or the outer part of the aligner.
- Make sure that a circle with the sticker design is right side up: the top of the design should be oriented towards the gingival part of the aligner.
- Make sure that a circle with the sticker design is lined up at the center of the crown and that there are no loose edges of the circle with the sticker design that are outside of the crown area.
- Use an index finger to press firmly and gently, rub so the sticker fully contacts the aligner.
- Slowly remove the applicator, rolling it backwards in order to remove the applicator without removing the sticker.
- Finish pressing the sticker so that it fully contacts the aligner.


Invisalign Stickables removal instructions

- Gently use a scrubbing motion with a finger to remove the sticker from an aligner. Toothbrush and water may be used to assist with a removal and cleaning process.
- Make sure that all adhesive from the sticker is off by wiping aligner surface clean with a tissue.
- Discard used sticker, clean the area thoroughly with a tissue, and apply a brand new sticker if desired.

Invisalign Stickables storage instructions

- Store at room temperature. Avoid direct sunlight.

Figure 1: How to apply Invisalign Stickables

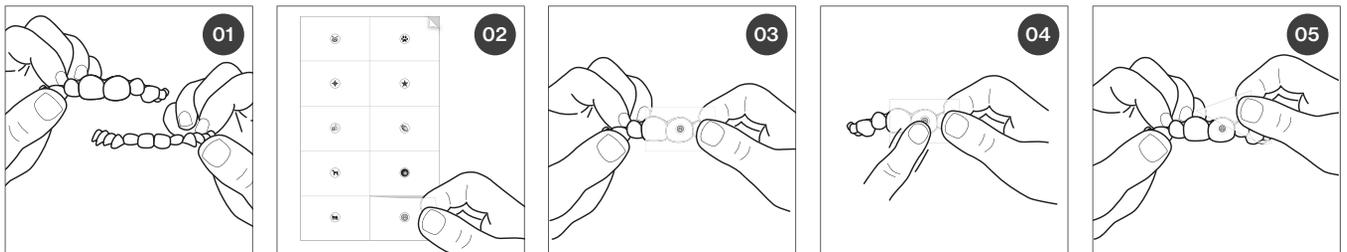

Start with clean and dry aligners. Identify which are for upper / lower teeth.

Note: It is recommended to wipe aligners with a tissue prior to applying stickers.

Select the sticker to apply and peel off the clear rectangle that holds it.

Place the sticker right-side up on the upper aligner.

Rub the sticker on the aligner firmly to adhere.

Slowly peel away clear rectangle and discard, leaving the sticker on the aligner.

Note: if sticker adhesiveness is reduced during application, wipe aligner surface clean with a tissue before reattempting sticker application.

Mode d'emploi des autocollants Stickables d'Invisalign™ ⚠

FRANÇAIS

Description de l'accessoire :

Les autocollants Stickables d'Invisalign sont des accessoires qui peuvent être utilisés pour décorer l'extérieur des aligneurs transparents Invisalign®. Ce produit est offert exclusivement par Align Technology, inc. Brevet en instance.

Indication d'utilisation

Les autocollants Stickables d'Invisalign sont destinés à être utilisés conformément au mode d'emploi comme accessoires décoratifs seulement avec les aligneurs transparents Invisalign® fabriqués à partir du matériau SmartTrack d'Invisalign®.

Précautions :

- L'utilisation des autocollants Stickables d'Invisalign n'a pas été testée sur les appareils de rétention Vivera, ni sur les matériaux d'aligneurs autres que SmartTrack, ni sur les aligneurs et les appareils de rétention transparents tiers, ni sur aucune autre fourniture orthodontique, comme les bagues, les appareils de rétention ou d'expansion et autres, ni sur aucune partie du corps, par exemple, les dents, la langue, les ongles et la peau.
- Il n'est pas recommandé d'appliquer les autocollants Stickables d'Invisalign dans des zones de chevauchement ou de surplomb prononcé des dents, sur des couronnes cliniques courtes, à l'intérieur de l'aligneur, sur la partie incisive ou linguale de l'aligneur, sur des dents avec des attaches, des crochets de précision ou des ailettes de précision, ni sur la partie compensant l'éruption et la partie pontique de l'aligneur, et les indicateurs de conformité. Appliquer des autocollants Stickables d'Invisalign à l'un ou l'autre de ces endroits peut faire en sorte que les autocollants se plient et aient des bords coupants, cachent les attaches ou s'enroulent à l'intérieur de l'aligneur et bloquent la dent sortie. Il est recommandé de placer un autocollant sur la surface de l'aligneur extérieur recouvrant la longueur d'une dent sur la partie buccale ou extérieure des dents supérieures : les incisives, centrales ou latérales, ou les canines. S'assurer que l'autocollant est de bonne taille pour la surface de la couronne de l'aligneur et qu'il n'empiète pas sur la partie incisive ou gingivale de l'aligneur.
- Les activités qui pourraient altérer, endommager, décoller ou déloger les autocollants Stickables d'Invisalign doivent être évitées. Les autocollants Stickables d'Invisalign décollés peuvent être accidentellement inhalés ou avalés par les patients ou pourraient entraîner d'autres blessures. Si des autocollants sont avalés, il est recommandé de les laisser passer naturellement par le système digestif. Si le patient s'étouffe et tousse, rester avec la personne et l'encourager à tousser jusqu'à ce que l'obstruction se dégage. Si le patient est incapable de parler ou manque d'oxygène, demander de l'aide d'urgence immédiatement. Informer le docteur Invisalign si les autocollants Stickables d'Invisalign se décollent à répétition ou pour toute autre question ou préoccupation. Si des symptômes inhabituels sont observés, consulter immédiatement un professionnel de la santé (ou un médecin).
- Si une réaction aux autocollants survient, cesser l'utilisation et communiquer avec le docteur Invisalign.

Mode d'emploi

- Les autocollants Stickables d'Invisalign devraient être appliqués sur l'extérieur des aligneurs tout juste sortis de l'emballage. Remarque : il est recommandé d'essuyer les aligneurs avec un mouchoir avant d'appliquer les autocollants.
- L'adhérence des autocollants peut également diminuer dans les cas où les aligneurs sont manipulés avec les mains ou s'ils sont mouillés en raison de la présence d'huile provenant des mains, de salive ou de liquide.
- S'ils ne sont pas tout juste sortis de l'emballage, nettoyer et sécher

soigneusement les aligneurs conformément au mode d'emploi avant d'appliquer les autocollants.

- Placer un autocollant sur la surface extérieure de l'aligneur recouvrant la longueur d'une dent sur la partie buccale des dents supérieures : les incisives, centrales ou latérales, ou les canines. S'assurer que l'autocollant est de bonne taille pour la surface de la couronne de l'aligneur et qu'il n'empiète pas sur la partie incisive ou gingivale de l'aligneur. Remarque : les autocollants peuvent être placés sur des parties de l'aligneur comportant des crêtes de pression.
- Il est recommandé de remplacer les autocollants tous les trois jours. Si les autocollants commencent à se décoller de l'aligneur, prière de consulter les directives de retrait des autocollants pour remplacer l'autocollant et en appliquer un nouveau.
- Les aligneurs transparents Invisalign décorés avec des autocollants doivent être portés et nettoyés conformément au mode d'emploi du système Invisalign.

Directives d'application des autocollants Stickables d'Invisalign (figure 1) :

- Soulever lentement un applicateur rectangulaire adhésif (avec un autocollant en dessous) à l'aide du pouce et de l'index d'une main tout en tenant la feuille d'autocollants avec l'autre main. Retirer délicatement de la feuille l'applicateur avec un autocollant en dessous.
- Utiliser l'applicateur pour aligner complètement l'autocollant sur la partie buccale ou extérieure de l'aligneur.
- S'assurer que le cercle arborant le motif de l'autocollant est orienté correctement : le haut du motif doit être orienté vers la partie gingivale de l'aligneur.
- S'assurer que le cercle arborant le motif de l'autocollant est aligné au centre de la couronne et qu'aucun bord décollé du cercle arborant le motif de l'autocollant ne dépasse la surface de la couronne.
- Utiliser un index pour appuyer fermement sur l'autocollant, puis le frotter pour qu'il adhère entièrement à l'aligneur.
- Retirer l'applicateur lentement, en le courbant vers l'arrière, afin de le retirer sans enlever l'autocollant.
- Continuer d'appuyer sur l'autocollant jusqu'à ce qu'il adhère entièrement à l'aligneur.


Directives de retrait des autocollants Stickables d'Invisalign

- Frotter délicatement l'autocollant avec un doigt pour le retirer de l'aligneur. Une brosse à dents et de l'eau peuvent être utilisées pour faciliter le retrait et le nettoyage.
- S'assurer que l'adhésif de l'autocollant a bien été retiré en essuyant la surface de l'aligneur avec un mouchoir.
- Jeter l'autocollant utilisé, nettoyer soigneusement la surface à l'aide d'un mouchoir et appliquer un tout nouvel autocollant si désiré.

Instructions d'entreposage des autocollants Stickables d'Invisalign

- Conserver à la température ambiante. Protéger de la lumière directe du soleil.

Figure 1: Comment appliquer les autocollants Stickables d'Invisalign

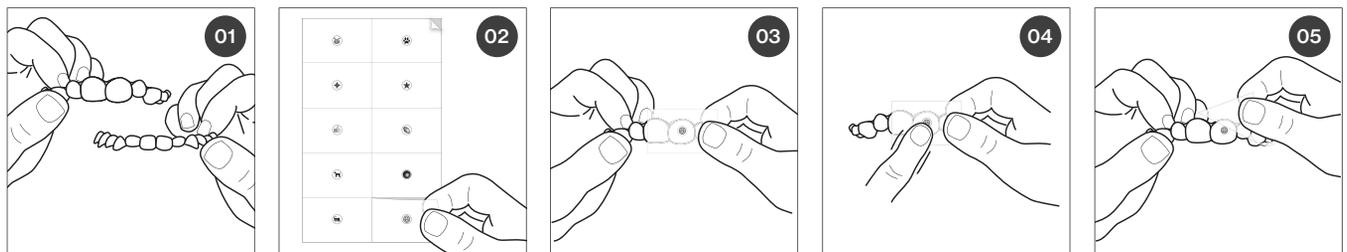

Commencer avec des aligneurs propres et secs. Départager l'aligneur de la mâchoire inférieure de celui de la mâchoire supérieure.
Remarque : il est recommandé d'essuyer les aligneurs avec un mouchoir avant d'appliquer les autocollants.

Choisir l'autocollant à appliquer et retirer le rectangle transparent qui le retient.

Placer l'autocollant correctement orienté sur l'aligneur supérieur.

Frotter l'autocollant sur l'aligneur pour qu'il y adhère.

Décoller lentement le rectangle transparent, puis le jeter. L'autocollant reste ainsi sur l'aligneur. **Remarque :** si l'adhérence de l'autocollant diminue pendant l'application, essuyer la surface de l'aligneur avec un mouchoir avant de réessayer d'appliquer l'autocollant.